



ポイント式スケーラの脱着方法


ポイント式スケーラの取り外し方法

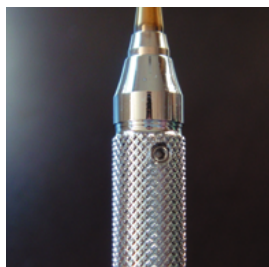

ネジの場所を確認します。

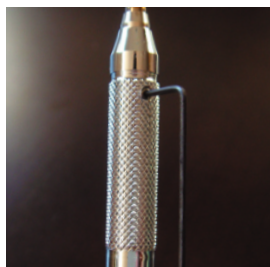


六角レンチをネジに差し込みます。

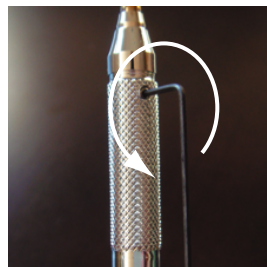


左回りに一回転させます。

※必要以上に回すとネジがはずれ、紛失の恐れがあります。

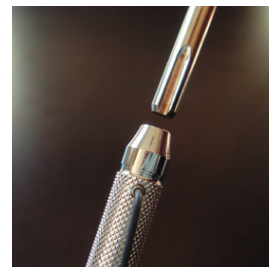


ポイントが取り外せるようになります。

ポイント式スケーラの取り付け方法

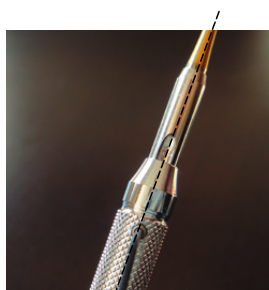

ポイントの溝とネジを合わせ、差し込みます。

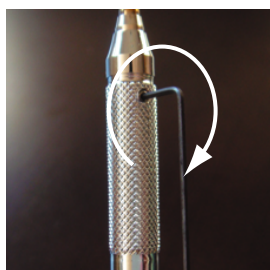

右回りに締め付けてください。


※あまり締め付けないようにしてください。
ネジ山等、破損の恐れがあります。

※ガタツキがないか確認してください。


※ちゃんと締まっているか確認してください。

ネジの締まりが悪い時

ネジに血液等が付着し、ネジの締め付けが悪くなる場合があります。

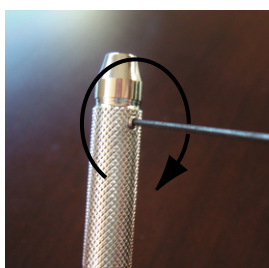


ポイントを「取り外し方法」を参照に取り外し、右回りに回し、ネジが中に抜けるまで回します。

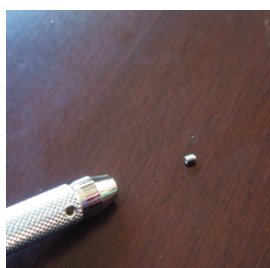

中に抜けたネジを取り出します。

※とても小さいネジです。ネジをなくさないようご注意ください。

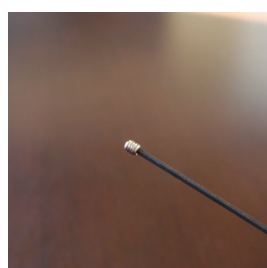

写真のように六角レンチとネジをセットし、ネジ穴に回し入れます。

「取り付け方法」を参照にポイントを取り付けたら、完了です。

第三種医療機器製造販売業許可 許可番号 13B 3X 00106

有限会社 菅原歯科精器工業

〒116-0011 東京都荒川区西尾久2-19-2

TEL 03(3893)8051

FAX 03(3810)3405